# Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Специализированный учебно-научный центр Лицей №1580 при МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра «Основы физики»

### Лабораторный практикум по физике Электронное издание 10 класс

## МЕХАНИКА

Лабораторная работа <u>М-1</u> Определение ускорения свободного падения с помощью машины Атвуда Лабораторный практикум по физике. Механика. — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Лабораторный практикум по физике для 10 класса состоит из лабораторных работ для занятий учащихся 10 классов в Специализированном учебно-научном центре МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Лабораторные работы, приведенные в сборнике, позволят учащимся глубже изучить законы физики и получить навыки проведения экспериментальных физических исследований.

> Составители лабораторных работ: И. Н. Грачева, В. И. Гребенкин, А. Е. Иванов, И. А. Коротова, Е. И. Красавина, А. В. Кравцов, Н. С. Кулеба, Б. В. Падалкин, Г. Ю. Шевцова, Т. С. Цвецинская.

Под редакцией И. Н. Грачевой, А. Е. Иванова, А. В. Кравцова.

<sup>©</sup> Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 2013

<sup>(</sup>С) Лицей №1580 при МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013

#### 1.1 Цель работы

Целями работы являются экспериментальное определение значения ускорения свободного падения и экспериментальная проверка уравнения прямолинейного равноускоренного движения точечного тела.

#### 1.2 Основные теоретические сведения

При свободном падении точечного тела с некоторой высоты h (начальная скорость равна нулю) уравнение движения тела имеет вид:

$$h = \frac{gt^2}{2}. (1.1)$$

Из этого уравнения по известным h и t определяется ускорение свободного падения g:

$$g = \frac{2h}{t^2}. (1.2)$$

# 1.3 Описание экспериментальной установки и методика проведения работы

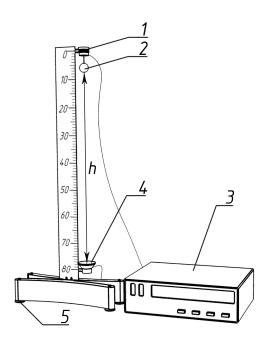


Рис. 1.1. Схема экспериментальной установки

Работа выполняется на машине Атвуда с электронным секундомером. Схема установки представлена на рис. 1.1.

При замыкании электрической цепи электромагнит 1 удерживает стальной шарик 2 на конце иглы 6. При разрыве цепи питания (отключении выключателя, находящегося на пульте секундомера 3) шарик отрывается и начинает свободно падать, при этом включается секундомер.

Приемная площадка 4 оборудована контактами, формирующими сигнал «Стоп» секундомера. Поэтому при ударе шарика о площадку секундомер прекращает отсчет времени.

№ измерения	<i>h</i> , м	t, c			/t\ c	/+\2 c2	$g$ , $M/c^2$
		1	2	3	$\langle \iota \rangle$ , C	$  \langle \iota \rangle , c  $	g, M/C
1	0,1						
2	0,2						
3	0,3						
4	0,5						
5	0,8						

Таблица 1.1.

При проведении опытов следует учитывать, что работа приемной площадки в значительной степени зависит от того, насколько тщательно выставлена стойка машины Атвуда в вертикальное положение. Если шарик попадает в центр площадки, то секундомер останавливается практически мгновенно. Для установки стойки служат уравнительные винты 5.

#### 1.4 Порядок выполнения работы и обработки результатов

- 1. Во время домашней подготовки сделайте таблицу 1.1 для записи результатов измерений и вычислений.
- 2. Ознакомьтесь с устройством прибора и получите допуск к работе у преподавателя.
- 3. Приемную площадку укрепите на шкале против отметки 0,8 м. Площадка должна быть расположена таким образом, чтобы против отметки находилась верхняя кромка прижимной планки.
- 4. Установите стойку машины в вертикальное положение.
- 5. Включите цепь электромагнита и установите шарик на конце иглы. Нажмите кнопку «Сброс» секундомера.
- 6. Выключателем на панели секундомера разомкните цепь электромагнита. Шарик начнет падать, одновременно начнется отсчет времени секундомером. Приборная погрешность секундомера  $t=10^{-4}$  с. При попадании шарика на приемную площадку отсчет времени прекращается. Если шарик не попал в центр приемной площадки, то подрегулируйте винтами 5 положение стойки и снова повторите пп. 5–6.
- 7. Выполняя пп. 5–6, проведите опыты для значений высоты h, указанных в таблице 1.1. Для каждой высоты измерения выполняются по 3 раза. Данные измерений занесите в таблицу 1.1. Выполните расчеты и заполните все графы таблицы 1.1. Расчет g следует выполнять по формуле (1.2). Пользуясь сведениями, изложенными во введении к лабораторной работе M–0, рассчитайте погрешность измерения g.
- 8. Постройте график зависимости удвоенной высоты падения 2h от квадрата времени падения  $\langle t \rangle^2$ . Не забудьте отметить точку 2h=0 при  $\langle t \rangle^2=0$ . По наклону этого графика определите ускорение свободного падения g.
- 9. Напишите заключение к работе, обязательным элементом которого должно быть сравнение полученных двумя способами (п. 7 и п. 8) значений ускорения свободного падения q. За истинное значение примите  $q = 9.81 \text{ M/c}^2$ .

### 1.5 Контрольные вопросы

- 1. Почему необходимо устанавливать прибор в вертикальное положение?
- 2. Сказывается ли сопротивление воздуха на результатах измерений?